


Dispozitiv facial de înfrumusețare cu LED

Rejuvenare facială cu lumină fonică



Manual de instrucțiuni

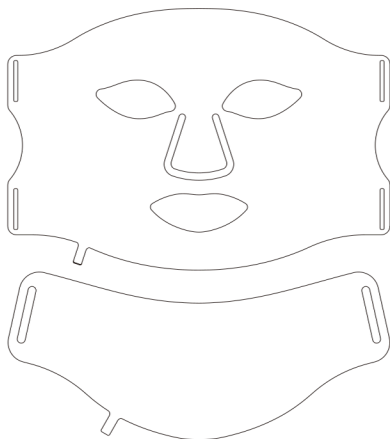

PREFAȚĂ


Vă mulțumim că ați ales produsele noastre!

Simplificați-vă viața cu dispozitivul facial cu LED pentru rejuvenare a pielii cu fotoni

Pentru confortul dumneavoastră, vă rugăm să citiți cu atenție următoarele înainte de a utiliza produsul, deoarece poate explica proceduri importante de operare.

Dispozitivul facial de înfrumusețare cu LED pentru rejuvenare a pielii cu fotoni este un dispozitiv facial de înfrumusețare cu LED portabil și reîncărcabil pentru uz casnic. Structura de suprafață a acestui produs este compusă din material siliconic alimentar, care este convenabil și ușor de utilizat, pliabil și portabil și poate fi fixat cu o cataramă reglabilă din nailon, potrivit pentru diferite grupuri de persoane.

Are întotdeauna $70 \times 3 = 210$ fascicule, rezolvă fundamental problema albirii și îmbătrânirii pielii, adică: crește activitatea celulelor; promovează metabolismul celular, astfel încât pielea secretă collagen și țesut fibros pentru a se umple singură; accelerează revenirea fluxului sanguin, crește elasticitatea pielii, îmbunătățește pielea următoare, toate condițiile, pentru a obține astfel efecte de albire, ajustare a pielii, anti-riduri, pete ușoare și alte efecte de reparare.

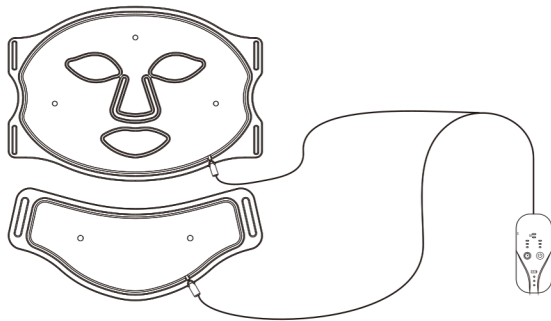

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE


Prima instalare

Înainte de a deschide pachetul pentru utilizare, vă rugăm să vă asigurați că mânerul controlerului dispozitivului de înfrumusețare facială este complet încărcat. Indicatorul luminos al controlerului va începe să clipească, indicând faptul că se încarcă. Când este complet încărcat, indicatorul luminos al bateriei se va opri din clipit, indicând faptul că încărcarea este completă. Timpul de încărcare este de 4 – 5 ore.





Purtarea dispozitivului facial de înfrumusețare cu curea reglabilă de fixare vă permite să purtați dispozitivul facial de înfrumusețare confortabil. Când aveți nevoie să instalați produsul, treceți cureaua prin orificiul de intrare de pe cealaltă parte a măștii, înfășurați cureaua în jurul feței și fixați-o bine.

Diagrama de instalare

Instalați curelele auto-fixante
Conectați dispozitivul și controlerul

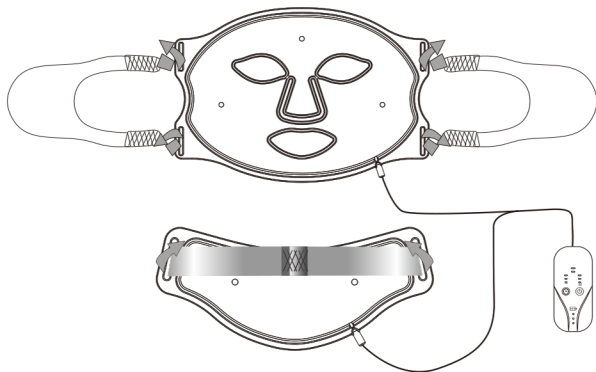

Controler

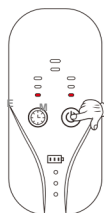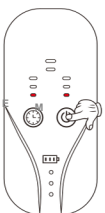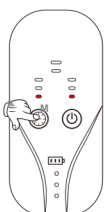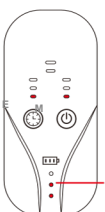01  Apăsați lung pentru pornire. Timpul de funcționare prestabilit este 10 minute.	02  Apăsați pentru a schimba sursele de lumină. Există 7 niveluri în total.
03  Apăsați pentru a schimba sursele de lumină. Există 7 niveluri în total.	04  Lumină roșie intermitentă dispozitivul se încarcă. Trei lumini aprinse simultan încărcarea este completă.

Test de sensibilitate la lumină

Înainte de a folosi acest produs pentru prima dată, vă rugăm să efectuați un test de sensibilitate la lumină:

1. Puneți dispozitivul pe braț, porniți-l și lăsați-l să lumineze timp de 10 minute. Dacă apar simptome precum roșeață a pielii sau mâncărime, este posibil să aveți o piele sensibilă la lumină. În acest caz, se recomandă să opriți utilizarea sau să consultați un specialist înainte de a relua utilizarea.
2. Înainte de folosire, curățați fața și mențineți-o uscată (fără machiaj, pentru a preveni posibile ingrediente fotosensibile care ar putea influența eficiența tratamentului).
3. După utilizare, pielea poate prezenta roșeață, ceea ce reprezintă o reacție normală și dispare în 1–2 ore.

Instrucțiuni de încărcare:

1. Acest produs conține baterii litiu-ion polimer și nu trebuie folosit în timpul încărcării. (Notă: dacă este folosit în timpul încărcării, se pot produce daune bateriei și echipamentului, iar aparatul nu se va aprinde sau nu va funcționa).
2. Înainte de prima utilizare, vă rugăm să încărcați complet dispozitivul. La încărcare, conectați cablul USB la controler, introduceți ștecherul, porniți alimentarea și începeți încărcarea.
3. Când indicatorul luminos al controlerului clipește, dispozitivul este în stare de încărcare; atunci când indicatorul luminos se stinge, încărcarea este completă.

Sfaturi

Înainte de utilizare, expuneți fața la lumină timp de 1 minut; dacă nu apar simptome de disconfort, puteți continua utilizarea.

Vă rugăm să începeți de la treapta minimă, construiți treptat toleranța pielii și alegeți nivelul de energie conform stării reale a pielii.

Nu creșteți orbește timpul și frecvența expunerii la lumină; trebuie să ajustați durata expunerii în funcție de starea pielii.

Se recomandă folosirea acestui produs de 3–5 ori pe săptămână, durata unei ședințe fiind de 20 de minute.

După ce apar rezultate vizibile, reduceți utilizarea la 2–3 ori pe săptămână.



ATENȚIE

Nu folosiți dispozitivul în timp ce se încarcă.

Nu pliați masca pentru depozitare, altfel firele din interior se pot deteriora.

Introducere iluminare

Lumină roșie (630 nm):

Îmbunătățește activitatea celulară.

Accelerează metabolismul și stimulează formarea collagenului.

Contribuie la albirea pielii și reducerea petelor pigmentare.

Favorizează întinerirea pielii și reducerea ridurilor.

Crește elasticitatea pielii și îmbunătățește condiția generală a tenului.

Repară pielea deteriorată.

Reduce porii și conferă fermitate pielii.

Efecte anti-îmbătrânire și antioxidante.

Lumină albastră (460 nm):

Poate distruge eficient *Propionibacterium* și alte bacterii fără a afecta țesutul pielii și reduce inflamația acneei, grăbind vindecarea într-un timp scurt.

Eficientă în eliminarea acneei.

Are efect de sterilizare și antiinflamator.

Repară pielea fără a lăsa urme sau pigmentare post-acnee.

Lumină verde (520 nm):

Neutralizează și echilibrează, poate reduce secreția de sebum și echilibrează raportul apă-ulei din piele.

Ameliorează eficient tensiunea psihică.

Stimulează drenajul limfatic și reduce edemele.

Lumină violet (630 nm + 460 nm, lumină duală roșie + albastră):

Îmbunătățește schimbul de oxigen celular.

Ajută celulele pielii să-și refacă energia.

Descompune pigmentul.

Favorizează detoxifierea limfatică.

Îmbunătățește textura pielii, rugozitatea, ridurile.

Reduce roșeața, febra, petele și mușcăturile.

Lumină galbenă (520 nm + 630 nm, lumină duală verde + roșie):

Combină eficiența a două tipuri de terapie cu lumină.

Foarte eficientă în tratarea acneei și a cicatricilor post-acnee.

Oferă un efect de reparare deosebit de bun.

Lumină cyan (520 nm + 460 nm, lumină duală verde + albastră):

Îmbunătățește treptat energia celulară.

Are un efect foarte bun asupra metabolismului.

Lumină albă (460 + 520 + 630 nm, lumină triplă albastru + verde + roșu):

Pătrunde adânc în piele.


Accelerează metabolismul țesuturilor active.

Descompune pigmentarea.

Îmbunătățește liniile fine și pielea lăsată.

PARAMETRII PRODUSULUI

Nume	Dispozitiv de înfrumusețare LED pentru rejuvenare a pielii cu fotoni
Număr de LED-uri	210+99 de înaltă calitate
Tensiunea de încărcare	5V 0.5A
Timp de încărcare	4-5 ore
Greutate netă	212g
Capacitatea bateriei	1200mAh
Fabricat în China	ROHS CERO

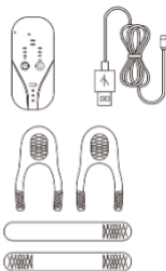

● Instrument de înfrumusețare x 1


● Bandă de fixare x 4

● Protecție pentru ochi x 2

● Cablu de încărcare x 1

● Manual x 1

● Controler x 1

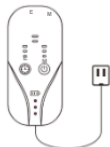

Indicatorul de pe ecran clipește pentru a semnala încărcarea, și indicatorul luminos se aprinde pentru a indica finalizarea încărcării.



Vă rugăm să încălcați controlerul când dispozitivul și controlerul nu sunt conectate. Și niciodată să nu utilizați dispozitivul în timpul încărcării!