




**Epilator IPL TrustTech
JDK1005/Y1104**

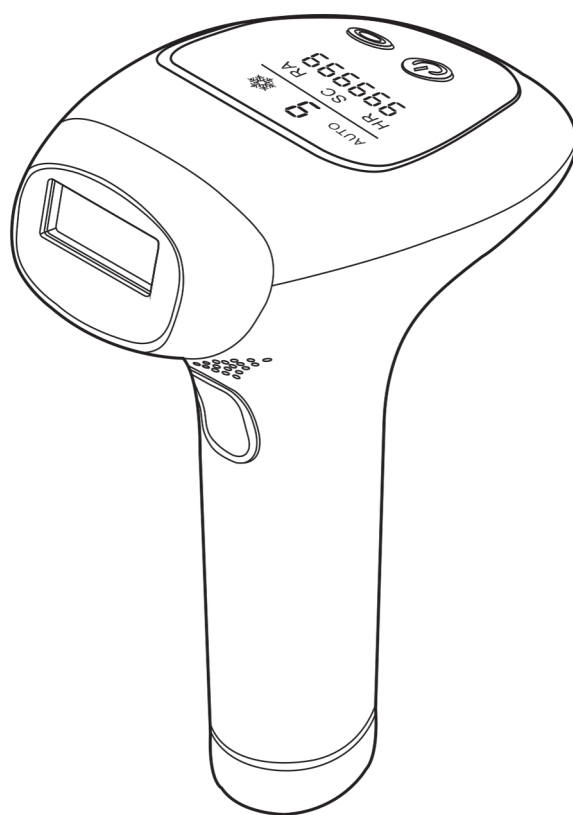

Manual de utilizare

*Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs.
Pentru a vă facilita utilizarea, vă rugăm să citiți cu atenție
acest manual și să îl păstrați corespunzător.
Imaginile din acest manual sunt doar cu titlu de ilustrare.*

Precauții de siguranță

Vă rugăm să utilizați corect produsul conform instrucțiunilor din manual.


Minorilor sub 16 ani le este interzis să utilizeze acest dispozitiv, iar pentru siguranță păstrați-l departe de copii.

Pentru a respecta strategia de dezvoltare durabilă, ne rezervăm dreptul de a modifica produsele noastre, inclusiv funcțiile, interfața și aspectul.


Din cauza factorilor de upgrade al produsului, dacă există vreo neconcordanță între descriere și produsul real, se va lua în considerare produsul real.

Vă rugăm să purtați ochelari de protecție atunci când utilizați acest produs și să țineți fereastra de flash departe de ochi în timpul procesului de iluminare.


2. Structura produsului și accesorii

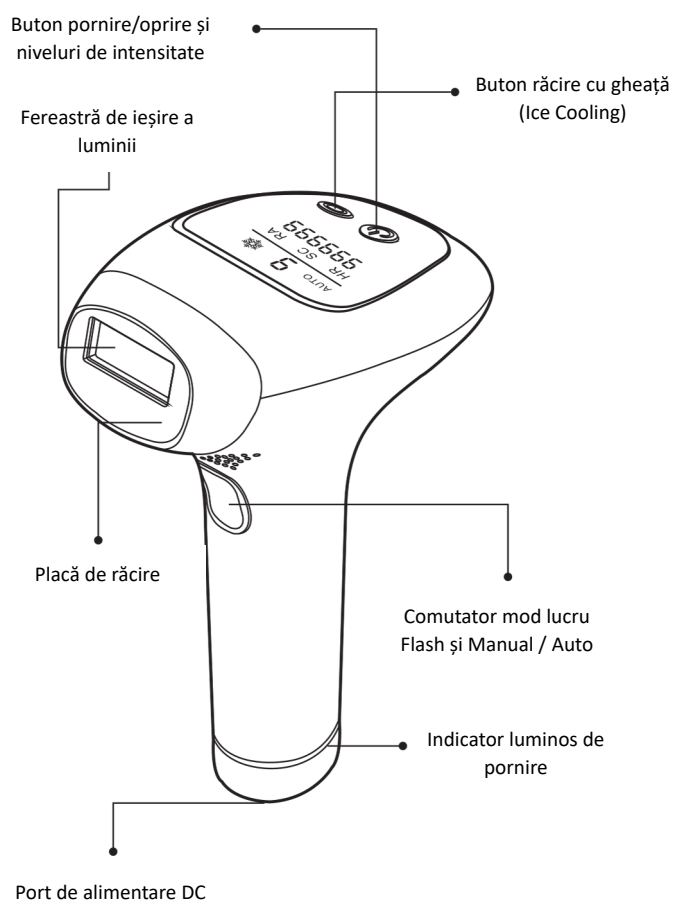

2

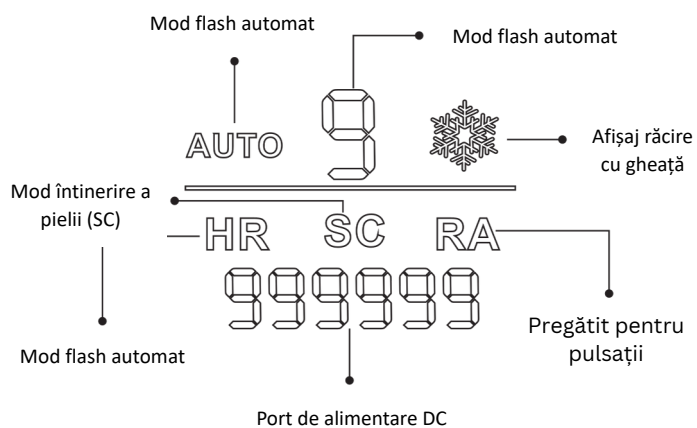

Ce include pachetul:

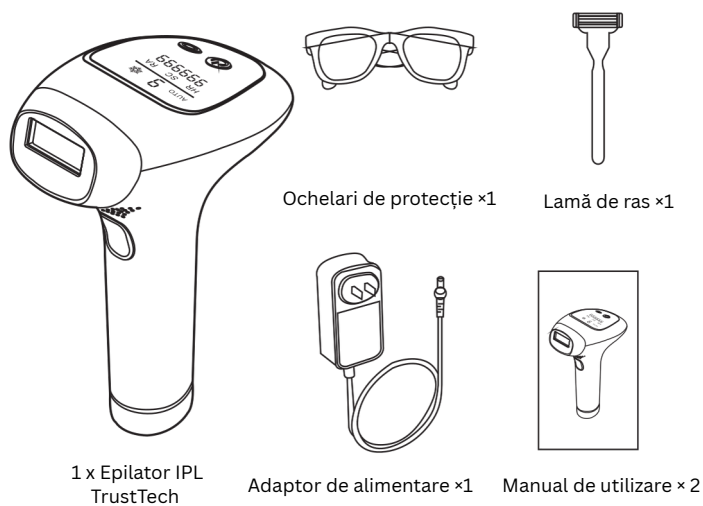

3

3. Introducere funcții produs.

Pornire

După conectarea la sursa de alimentare, indicatorul de pornire se aprinde, apoi apăsați scurt/lung butonul Power pentru a porni aparatul. În starea pornit, apăsați scurt butonul de nivel de intensitate pentru a regla treptele de la 1 la 9, iar pe ecran vor apărea nivelele 1–9.

1-a treaptă: apare „SC mode”, este pentru întinerirea pielii și îngrijirea părului.

3-a treaptă: apare „HR mode”, este doar pentru îndepărtarea părului.

Oprire

Apăsați lung butonul Power timp de 3 secunde pentru a opri aparatul. Când este pornit, se va opri automat pentru siguranță dacă nu este utilizat timp de 15 minute.

Mod Flash Manual

Modul manual va fi activat automat când aparatul este pornit. Vă rugăm să așezați dispozitivul vertical pe piele și să apăsați scurt butonul Flash pentru a începe tratamentul IPL. (Notă: Nu există flash dacă pielea nu este în contact complet cu aparatul.)

Mod Flash Automat

După ce apăsați butonul Flash timp de 3 secunde, pe ecran va apărea pictograma „AUTO”, ceea ce înseamnă că dispozitivul este în modul Auto Flash. Va emite automat impulsuri imediat ce pielea este în contact complet. Dacă doriți să reveniți la modul Manual, apăsați din nou butonul Flash timp de 3 secunde.

Mod Răcire cu Gheață (Ice Cooling Mode)

Apăsați scurt butonul „Ice cooling” pentru a intra în modul de răcire, iar pe ecran va apărea pictograma ❄️.

Mod Răcire cu Gheață:

Acest mod poate fi folosit separat pentru a calma pielea. Vă rugăm să nu apăsați butonul Flash atunci când folosiți doar funcția de răcire. (Notă: Nu expuneți aceeași zonă a pielii pentru mult timp, pentru a evita disconfortul.)

În modul Răcire cu Gheață, poate fi folosit simultan cu modul Manual Flash sau Auto Flash.

(Notă: Nu există flash atunci când pielea nu este în contact complet, dar funcția de răcire tot va fi activată.)

Răcire cu Gheață + Mod Flash Manual:

Aparatul trebuie ținut vertical pe piele, impulsul va fi emis la fiecare apăsare atunci când lumina de contact este complet atașată de piele, iar efectul de răcire cu gheață va fi realizat simultan pentru a calma disconfortul.

Răcire cu Gheață + Mod Flash Automat:

Pictograma „AUTO” va apărea după apăsarea butonului Flash timp de 3 secunde, și se va activa modul automat.

Flash-ul va fi emis automat atunci când pielea este complet în contact cu aparatul, iar efectul de răcire cu gheață va funcționa simultan pentru a calma disconfortul.

Este un fenomen normal ca picături de apă să apară pe zona de răcire a lămpii sub modul gheață. Vă rugăm să folosiți o cârpă moale pentru a șterge picăturile de apă după oprirea aparatului pentru a evita lumina falsă.

4. Parametrii tehnici ai produsului

Tub lampă: Tub de cuarț xenon
Nivel energie: 9 niveluri ajustabile
Adaptor alimentare: AC100-240V 50/60Hz 36w-48w
Energie luminoasă: 2.2-5.2J/cm²
Interval lungime de undă: 470nm-1200nm
Intrare: DC12V 3A-4A
Greutate netă: 296g
Dimensiune produs: 174x125x82mm
Viteză flash: 1.4-2.3s
Sursă de alimentare: adaptor AC-DC
Sursă de lumină: lumină pulsată intensă
Fereastră flash: 3.6cm²
Număr de flash-uri: 999,999
Temperatură de lucru: 0°C < T < 40°C
Garanție: 2 an

5. Contraindicații și precauții pentru utilizare sigură

Restricții de utilizare

Utilizarea produsului poate cauza disconfort sau efecte adverse la persoanele cu alergii, boli de piele și dermatite alergice, piele sensibilă etc.

Dacă apar reacții adverse în timpul utilizării, opriți imediat folosirea produsului.

✗ Nu utilizați acest produs pe zone cu integritatea pielii compromise (ex: arsuri, bășici, tăieturi, răni, boli de piele active sau infecții).

✗ Dacă luați medicamente fotosensibilizante pentru tratamente importante, consultați medicul înainte de utilizare, altfel produsul poate dăuna pielii.

✗ Nu este potrivit pentru femei însărcinate, care alăptează, în perioada menstruală, persoane cu cicatrici, diabet, piele fragilă sau sensibilă la lumină.

✗ Este interzis în caz de boli cardiace grave, hipertensiune moderată-severă, tumori maligne, foliculită, boli infecțioase de piele, piele arsă sau tulburări de coagulare.

✗ Nu folosiți dacă aveți metabolism anormal al collagenului, istoric de cicatrici sau vindecare deficitară a rănilor.

✗ Pacienții cu boli vasculare (vene varicoase, vasodilatație la locul iradierii) nu trebuie să utilizeze produsul.

✗ Nu folosiți dacă pielea este sensibilă la lumină sau predispusă la erupții/alergii.

✗ Nu utilizați dacă zona iradiată este infectată, prezentați herpes simplex, leziuni cutanate sau hematoame.

✗ Este interzisă utilizarea în cazul bolilor cu răspuns imun compromis (inclusiv HIV, lupus eritematos, porfirie etc.).

✗ Orice pacient cu tulburări de coagulare este interzis, precum și cei care folosesc tretinoin, acid de fructe (AHA), acid salicilic (BHA) sau acid azelaic.

✗ Utilizați cu prudență dacă ați făcut epilare chimică în ultimele 30 de zile, dacă ați folosit produse de albire a pielii recent sau produse ce conțin vitamina A.

✗ Nu utilizați împreună cu produse pe bază de uleiuri esențiale. Asigurați-vă că pielea din zona de tratament este curată și uscată, fără loțiuni, lubrifianți sau alte produse cosmetice.

✗ Dacă suprafața pielii nu este curată și uscată, experiența de utilizare poate fi afectată și produsul poate fi deteriorat.

✗ Produsul este interzis persoanelor care și-au injectat recent substanțe de umplere (fillere) sau toxine.

✗ Nu utilizați pe piele arsă sau bronzată până la recuperarea completă, deoarece riscul de arsuri crește. Persoanele cu epilepsie sau migrene declanșate de lumină sunt interzise, lumina intensă putând agrava boala.

✗ Nu utilizați dacă zona de tratament are tatuaje, pete maronii/întunecate (pistrui închiși, alunițe, negi). Acestea pot absorbi mai multă energie și pot crește riscul de arsuri.

✗ Nu folosiți în jurul capului, urechilor, mameloanelor, organelor genitale sau anusului, pentru a evita riscul de arsuri.

✗ Este interzisă utilizarea în caz de psoriazis, eczeme, herpes, răni sau erupții. Pielea este mai sensibilă și predispusă la umflături, bășici sau infecții. Consultați medicul înainte de utilizare și folosiți aparatul doar după vindecare completă.

✗ Cicatricile, pielea fotosensibilă sau utilizarea medicamentelor fotosensibilizante cresc sensibilitatea pielii. Exemple: antiinflamatoare nesteroidiene (aspirină, ibuprofen, paracetamol), tetraciclină, fenotiazine, diuretice, sulfonamide, triazină imidazoliu, fluorodiazină, vinblastină, griseofulvin, acid carotenoic, vitamina A (retinol, isotretinoin), acid retinoic topic. Utilizarea este interzisă în aceste cazuri.

✗ Dacă aveți antecedente de boli fotosensibile (porfirie, erupții solare polimorfe, urticarie solară), nu utilizați dispozitivul – acestea vor face pielea mai sensibilă.

6. Operare și întreținere

⚠ Purtați ochelari de protecție când folosiți aparatul.

⚠ Înainte de utilizare, curățați zona corpului ce urmează a fi epilată. Nu folosiți cosmetice sau produse de îngrijire pe piele înainte, deoarece pot afecta eficiența tratamentului.

⚠ La prima utilizare, începeți cu un nivel scăzut și selectați treapta potrivită pentru a evita deteriorarea pielii. La niveluri mari, pielea se poate înroși sau umfla – aplicați funcția de răcire cu gheață pentru calmare imediată.

⚠ După finalizarea operațiunii, hidratați pielea și protejați-o de razele solare directe sau ultraviolete.

⚠ Se recomandă utilizarea produselor hidratante și reparatoare pe bază de plante.

- ⚠ Curățați suprafața aparatului cu o lavetă uscată sau ușor umedă, fără alcool.
- ⚠ Nu expuneți aparatul și accesoriile la lichide și nu îl folosiți în medii umede.
- ⚠ Păstrați dispozitivul într-un loc uscat, bine ventilat și ferit de copii.
- ⚠ Nu introduceți obiecte metalice în orificiul de răcire – există risc de electrocutare.
- ⚠ Dacă carcasa este deteriorată sau a intrat accidental apă, returnați produsul producătorului pentru reparație. Dacă apa intră în aparat cât timp este alimentat, deconectați imediat sursa de curent.
- ⚠ Nu încercați să dezamblați sau să reparați aparatul fără autorizare.
- ⚠ Dacă aparatul funcționează anormal, trimiteți-l înapoi împreună cu toate accesoriile pentru întreținere realizată de profesioniști.

Atenționare

- ⚠ Nu folosiți aparatul direct asupra ochilor – lumina intensă poate provoca leziuni oculare.
- ⚠ În condiții normale de utilizare, nu atingeți direct orificiul de evacuare a căldurii – temperatura ridicată poate provoca arsuri ale pielii.

În utilizarea normală, nu introduceți obiecte în aparat – poate provoca daune organismului.

Nu aplicați deodorant/antiperspirant imediat după iradierea axilelor.

Pentru a evita arsuri și defecte, curățați regulat murdăria din fereastra de iradiere.

Nu apropiați fereastra de iradiere de obiecte ușor demagnetizabile – pot apărea defecțiuni.

Nu utilizați dacă orificiile de ventilație sunt blocate – există risc de fum sau incendiu.

Pentru funcționare normală, nu îndreptați fereastra de iradiere către obiecte negre.

Nu iradiați haine, păr sau alte obiecte – există risc de înnegrire, decolorare sau deteriorare.

Nu utilizați pe animale de companie – poate provoca răni.

Poate provoca leziuni oculare (până la orbire) sau leziuni ale pielii dacă instrucțiunile nu sunt respectate.

Nu reutilizați pe aceeași zonă în mod excesiv – utilizarea frecventă poate dăuna pielii.

Utilizarea greșită poate afecta ochii – protejați-vă și nu folosiți aparatul în zona de deasupra ochilor sau prea aproape de aceștia.

Faceți un test pe o mică porțiune de piele înainte și așteptați 2 ore pentru a observa reacția. Puteți folosi aparatul doar dacă nu apar roșeață sau bășici.

În timpul utilizării, purtați ochelarii de protecție și așezați fereastra de lumină cât mai aproape de piele.

După utilizare, curățați părul și produsele de pe piele atașate de aparat pentru a evita defecte sau deteriorarea pielii.

Respectați instrucțiunile și purtați corect ochelarii pentru a evita stimularea luminoasă puternică.

Setați intensitatea luminii conform tipului dvs. de piele și folosiți întotdeauna de la treapta 1 la prima utilizare.

Este normal ca pielea să fie ușor roșie și caldă după utilizare.

Produsul nu trebuie lăsat nesupravegheat atunci când este pornit; opriți-l imediat după utilizare.

Curățați pielea înainte de tratament – aceasta trebuie să fie lipsită de păr rezidual, complet uscată și fără urme de loțiuni sau uleiuri.

Dacă există o diferență de temperatură mai mare de 20°C între mediul în care a fost păstrat și mediul de utilizare (ex. trecere de la frig la cald), opriți aparatul și așteptați 2 ore înainte de a-l folosi.

Nu utilizați lângă obiecte inflamabile sau explozive (spray-uri, butelii cu gaz etc.), există risc de incendiu sau electrocutare.

Temperatura ambientală de utilizare: 0–45°C. Verificați temperatura camerei înainte de folosire.

Evitați expunerea zonei tratate la radiații UV puternice timp de 24h după tratament.

Dacă ventilatorul intern nu funcționează (nu se aude zgomotul caracteristic) după pornire, nu folosiți aparatul – există risc de fum sau incendiu.

Nu utilizați aparatul în baie, duș sau în apropierea apei. Păstrați adaptorul de alimentare uscat.

Nu utilizați aparatul pentru perioade foarte lungi. După 1 oră de folosire, opriți-l și lăsați-l să se răcească timp de 10 minute.

Dacă carcasa, lentila sau sursa de alimentare sunt deteriorate, opriți imediat utilizarea. Nu încercați să reparați singur – trimiteți produsul la service autorizat.

NU utilizați produsul pentru următoarele zone/condiții:

1. Produsul nu trebuie folosit pentru tratarea bolilor.
2. Nu este recomandat pentru îndepărtarea părului alb sau cărunt.
3. Nu utilizați pe piele natural închisă la culoare.
4. Nu expuneți zona tratată direct la soare după utilizare.
5. Asigurați-vă că fereastra lămpii este lipită de piele în timpul utilizării.
6. Nu folosiți aparatul într-un mediu întunecat.
7. Nu folosiți în lumina directă a soarelui pentru a evita defecte.
8. Nu loviți și nu agitați produsul violent.

Nu scoateți ștecherul din priză fără să opriți mai întâi aparatul – există risc de deteriorare.

7. Test de sensibilitate a pielii

Înainte de primul tratament pe fiecare zonă nouă a corpului, se recomandă să testați pielea pentru posibile reacții, pe o suprafață mică.

Așteptați 24 de ore după test pentru a confirma că pielea este potrivită pentru tratamentul IPL.

8. Selectarea energiei

Începeți întotdeauna cu cel mai mic nivel de intensitate a luminii și alegeți treptat unul dintre cele 9 niveluri, în funcție de confort. Reduceți intensitatea luminii dacă simțiți durere sau disconfort.

Persoanele cu pielea mai închisă la culoare absorb mai multă lumină și prezintă un risc mai mare de reacții adverse (arsuri).

Pentru acestea se recomandă utilizarea unor niveluri mai mici. Persoanele cu piele foarte închisă (maro închis spre negru) NU trebuie să utilizeze tratamente IPL.

Tabel de referință pentru utilizatori

Culoare păr \ Culoare piele	Alb	Alb lăptos	Alb-crem	Maro deschis	Bej	Maro închis-negru
Negru	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Maro închis	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Maro	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Auriu	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Roșcat	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Alb	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Gri	✓	✓	✓	✓	✓	✗

✓ Aplicabil

✗ Non-aplicabil

Pregătirea înainte de utilizare


Curățați bine pielea – trebuie să fie fără păr, complet uscată și fără reziduuri uleioase (parfum, loțiuni, deodorant, protecție solară).

Asigurați-vă că fereastra de lumină este curată, fără murdărie sau păr, și că nu există deteriorări. Dacă este murdară, curățați-o pentru a evita defectarea produsului sau iritații ale pielii.

După 24h de la testul de sensibilitate, verificați starea pielii. Dacă nu există roșeață sau bășici, puteți folosi în siguranță aparatul. Nu se recomandă folosirea înainte de finalizarea testului de sensibilitate.

Cum se utilizează


Pași de utilizare

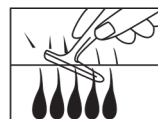

Pasul 1: Folosiți un aparat de ras pentru a îndepărta părul din zona care urmează a fi tratată.

Nu apăsați direct lama pe piele; radeți ușor sau în timpul băii.

Lama este foarte ascuțită – folosiți cu atenție pentru a evita zgârieturile.

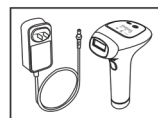

Pasul 2: Curățați fereastra de lumină și conectați adaptorul de alimentare.



Pasul 3: Apăsați scurt/lung butonul Power pentru a porni aparatul. În starea pornit, apăsați scurt butonul „ice” pentru a activa modul răcire.



Pasul 4: Purtați ochelari de protecție pentru a vă proteja ochii înainte de operațiunea de epilare.



Pasul 5: Începeți dintr-o zonă, așezați aparatul vertical pe piele și apăsați butonul o dată. Mutați apoi lampa pe zona următoare fără suprapuneri și continuați tratamentul pe toată suprafața dorită.



Pasul 6: Este normal ca în zona de răcire a lămpii să apară picături de apă atunci când folosiți modul răcire. Ștergeți-le cu o lavetă moale după ce opriți aparatul.

Sfaturi pentru utilizarea dispozitivului de epilare


1. Deoarece utilizarea repetată a flash-ului acumulează căldură, pentru a menține eficiența compresiei cu gheață se recomandă: după epilare, mențineți capul cu răcire pe zona tratată timp de aproximativ 30 de secunde, apoi treceți la următoarea zonă.
2. Acest lucru va calma pielea și va îmbunătăți efectul de răcire.

Program de tratament

Săptămânile 1–3: folosiți aparatul de 3 ori pe săptămână. Creșterea părului începe să încetinească, iar densitatea scade cu peste 75%.

Săptămânile 4–6: folosiți aparatul de 2 ori pe săptămână. Firele devin mai subțiri și mai rare, iar pielea mai fină.

După săptămâna 6: folosiți aparatul 1–2 ori pe lună, selectiv, până se obține îndepărtarea permanentă.

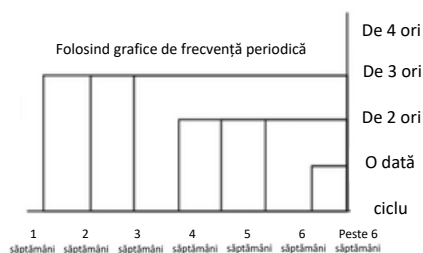

Notă: ajustați frecvența în funcție de grosimea și densitatea firelor de păr. Pentru părul mai gros sau mai des, se poate crește treapta de energie și numărul de utilizări.

Îngrijire după utilizare

Precauții după epilare:

Evitați contactul cu apa în primele 6 ore după tratament.

Nu folosiți parfum, măști sau cosmetice cu particule exfoliante imediat după tratament.

Evitați expunerea la raze UV timp de 24 de ore după tratament; aplicați protecție solară dacă este necesar.

Bronzarea artificială nu este permisă în perioada tratamentelor cu IPL.

Dacă este necesară o intervenție chirurgicală plastică în zona tratată, consultați medicul.

Dacă simțiți disconfort, opriți utilizarea și consultați un medic.

Curățare și întreținere

Pentru a menține eficiența și durata de viață a produsului, curățați dispozitivul înainte și după fiecare sesiune pentru a evita acumularea de praf și păr. Dacă nu este curățat regulat, eficiența aparatului scade.

Înainte de curățare, opriți aparatul și scoateți ștecherul din priză pentru a permite răcirea. Folosiți o lavetă moale și uscată pentru a curăța suprafața orificiului de lumină.

Depozitați aparatul într-un loc uscat și fără praf, la o temperatură între -10°C și 60°C.

Nu spălați aparatul sau accesoriile în chiuvetă sau mașina de spălat vase.

Nu folosiți bureți de sârmă, detergenți abrazivi (pastă de dinți etc.) sau lichide corozive (benzină, ulei de motor, acetonă etc.).

Notă: dacă apa nu curăță bine, se pot folosi câteva picături de alcool de concentrație mare (max. 95%) pentru curățare.

Protecția mediului

Când aruncați produsul, nu îl aruncați împreună cu gunoiul menajer. Trimiteți-l la un centru de reciclare autorizat pentru protecția mediului.

FAQ

Problema	Cauză	Soluție
Aparatul nu pornește	Nu este conectat la curent	Verificați dacă adaptorul este conectat
Nu emite flash	Lampa este prea fierbinte sau capul nu este lipit corect de piele	Lăsați aparatul să se răcească, apoi așezați-l corect pe piele
Ecranul nu afișează nimic	Defecțiune aparat	Verificați alimentarea; dacă nu funcționează, reparați sau înlocuiți produsul
Miros neplăcut în timpul flash-ului	Filtru murdar sau reziduuri de păr pe suprafață	Curățați filtrul și reduceți nivelul de energie.
Durere în timpul utilizării	Nerasul zonei care urmează să fie epilată	Înainte de a utiliza acest produs, vă rugăm să radeti părul din zona care urmează să fie iradiată. Dacă bărbieritul provoacă alergii cutanate, tundeți părul cât mai scurt posibil și utilizați-l într-un mediu confortabil.
	Zona tratată nu este potrivită pentru epilare sau intensitatea prea mare	Evitați zonele sensibile (organe genitale, anus, mameloane) și ajustați intensitatea la un nivel confortabil
	Intensitatea luminii este prea mare	Reduceți intensitatea luminii la un nivel confortabil
	Fereastra de transmisie a luminii este deteriorată	Reparați sau schimbați produsul imediat
Pielea roșie după utilizare	Reacție normală și temporară.	Aplicați aloe vera sau un pachet cu gheață
Rezultate slabe	Folosești o setare a intensității luminii prea mică pentru tine	Vă rugăm să alegeți o setare mai mare data viitoare
	Intensitate prea mică sau zona nu a fost tratată corect	Folosiți un nivel mai mare și asigurați contactul complet cu pielea
	Acest dispozitiv nu are niciun efect asupra culorii părului tău	Dacă părul tău este blond, gri, roșu sau alb, tratamentul nu va fi eficient.
	Utilizare insuficientă a acestui dispozitiv	Pentru a îndepărta cu succes tot părul, vă recomandăm să urmați perioada de tratament recomandată
	Reacționezi lent la expunerea la lumină	Acest produs trebuie utilizat continuu timp de cel puțin 5 luni, deoarece creșterea părului poate fi inhibată în această perioadă.
Aparatul se încinge după utilizare	Folosire îndelungată	Opriți aparatul și lăsați-l să se răcească

Garanție

1. Perioada de garanție:

Dispozitivul are garanție limitată de 2 ani, calculată de la data achiziției.

Responsabilitatea garanției:

2. Problemele de calitate apărute în perioada de garanție vor fi reparate gratuit, dacă nu sunt cauzate de factori umani.

Defecțiunile apărute prin utilizare anormală sau cauzate de forță majoră nu sunt acoperite de garanție.

3. Specificații ale garanției:

Pentru a beneficia de garanție, utilizatorul trebuie să prezinte un certificat de achiziție valid (ex. bon fiscal, certificat de garanție).

Dacă produsul este returnat cu ambalaj necorespunzător și se deteriorează în timpul transportului, reparațiile sau înlocuirea gratuită nu sunt acceptate.

Compania nu este responsabilă și garanția nu acoperă următoarele situații:

a. Incendii, cutremure, comportament terț, utilizare intenționată greșită, neglijență, folosire în condiții anormale sau evenimente imprevizibile.

b. Pagube colaterale, cum ar fi pierderea de venituri, întreruperea activității, pierderea utilizării aparatului, costuri de înlocuire a altor echipamente sau servicii, reclamații ale clienților.

c. Deteriorări cauzate de utilizarea produsului în alte moduri decât cele descrise în manual.

d. Situații care depășesc controlul companiei: probleme cauzate de accesorii sau piese care nu sunt vândute de companie, modificări sau reparații neautorizate, utilizare abuzivă, întreținere incorectă, plângeri nejustificate.

e. Defecțiuni cauzate de utilizarea în medii necorespunzătoare (ex. suprasarcină).

f. Defecțiuni cauzate de depozitarea incorectă (ex. daune provocate de rozătoare, pătrundere de lichide etc.).

Vă mulțumim că ați folosit acest produs!